


OPERATION MANUAL

Ultra-Low Temperature Freezer

Model : UCF-20.8-86-UL/UCF-25.7-86-UL/UCF-29.6-86-UL

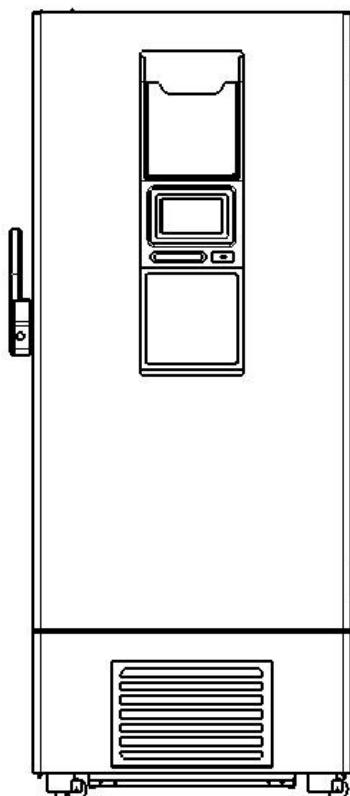

The image shown here is indicative only.

If there is inconsistency between the image and the actual product, the actual product shall govern.

- ❖ Suitable for cryogenic storage in hospitals, epidemic prevention stations, scientific research institutes, etc.
- ❖ Please read the Operation Manual carefully before use.
- ❖ Please keep the Operation Manual in a safe place for future reference.

CONTENTS

I. Preface	1
II. Features	1
III. Precautions for Safe Operation	2
IV. Handling Considerations.....	12
V. Precautions of Using	12
VI. Ambient Conditions	14
VII. Installation	15
VIII. Start-up of Appliance	16
IX. Components	17
X. System Settings	18
XI. Control Panel Introduction	21
XII. Remote Alarm Terminal.....	29
XIII. Compressor Delay Start Time Change	299
XIV. Alarm and Safety Features.....	30
XV. Routine Maintenance	32
XVI. Failure Recovery	34
XVII. Disposal of Abandoned Appliance.....	34
XVIII. Storage Box Rack (Optional).....	34
XIX. Specification.....	35
XX. Performance	36
XXI. Circuit Diagram	37
XXII. Packing List.....	37

I. Preface

- ❖ Please read the Operation Manual carefully before operation for your safety.
- ❖ We do not guarantee any safety if the appliance is used for any objects other than intended use or used by any procedures other than those mentioned in this manual.
- ❖ Please keep the Operation Manual at an approachable place.
- ❖ The contents of the manual will be subjected to change without notice due to the improvement of performance or functions.
- ❖ Please contact the sales representative or agency of us if you have any question of this operation manual.
- ❖ For any damage to the instrument the user is not required under this manual caused by, or individuals not in accordance with "Safety Tips" requires in the manual caused the damage, our company has no obligation and responsibility.
- ❖ Proper use of protective equipment (including clothing, gloves, goggles, etc.)
- ❖ Adopt good health habits, in strict accordance with the product instructions.
- ❖ Everyone has an obligation to be responsible for their own safety.
- ❖ Not Allowed direct contact with patients, use or affect the product and in the product storage items.
- ❖ Products without sterilization.
- ❖ The product is used only for storage, not during use with other materials, Organization and Technology in combination.
- ❖ Products can not be used to measure or analysis.
- ❖ Life and storage life of the products is irrelevant.
- ❖ Some models need to regularly add supplies, such as printer paper, test tubes, etc.
- ❖ This product is non-explosion-proof products.
- ❖ Non flash freeze equipment, is limited to keeping the temperature used.
- ❖ Equipment maintenance can only be used by our company or authorized agents to complete.
- ❖ Service life: According to affect key components of the shortest life expectancy.

II. Features

- ❖ Microcomputer digital thermostat, operating temperature range -70℃~-80℃.
- ❖ Multiple protection features (Boot delay protection, compressor high temperature protection) .
- ❖ Suitable for cryogenic storage in hospitals, epidemic prevention stations, scientific research institutes, etc.
- ❖ Internationally renowned brand compressors, stronger cooling capacity.
- ❖ Multi-layer adjustable independent storage space for easy access
- ❖ Multiple door seals, interior and exterior insulation door design, better insulation.
- ❖ Save the appearance of the box, color or pattern see the real thing.
- ❖ Prohibits the storage of live products, flowers, etc.

III. Precautions for Safe Operation

- ✓ It is imperative that the user complies with this manual as it contains important safety advice.
- ✓ Items and procedures are described so that you can use this appliance correctly and safely.

If the precautions advised are followed, this will prevent possible injury to the user and any other person.

WARNING

Failure to observe "WARNING" signs could result in a hazard to personnel possibly resulting in serious injury or death.

CAUTION

Failure to observe "CAUTION" signs could result in injury to personnel and damage to the appliance and associated property.

PROHIBITION

Failure to observe "PROHIBITION" signs otherwise it may cause damage to the save box or endanger the personal safety of the user.



< Mark on the Appliance>

This label is marked around the hinge of the door to remind the user to pay attention to the hand when opening and closing the door.



< Mark on the Appliance>

This label is on the cover in which the electrical components of high voltage are enclosed to prevent the electric shock. The cover should be removed by a qualified engineer or a service personnel only.



< Mark on the Appliance>

This label is marked around the location where the combustible gas is stored to indicate that the device may leak combustible gas.

Only qualified engineering technicians or service personnel can service this equipment. Only qualified engineering technicians or service personnel can remove the cover.



< Mark on the Appliance>

This label is marked around the rotating mechanism such as fan, gear, etc. to prevent accidental hand injury.

Only qualified engineering technicians or service personnel can remove the cover.

**< Mark on the Appliance>**

This label is marked around the door handle to indicate the door handle's opening and closing direction.

**< Mark on the Appliance>**

This label is on the outer surface of the device to remind the user to wear gloves to prevent frostbite when accessing the article.

**< Mark on the Appliance>**

This label is on the outer surface of the device to remind the user of the danger of frostbite.

WARNING

-CAUTION: This appliance should only be installed by qualified engineers or service personnel. The installation by unqualified personnel may cause electric shock or fire.

-ATTENTION: Cet appareil ne doit être installé que par des ingénieurs qualifiés ou du personnel de service. L'installation par du personnel non qualifié peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

-CAUTION: The appliance should be installed on the solid floor with suitable measures to avoid overturning. Otherwise, it may cause the appliance overturn or physical injury.

-ATTENTION: L'appareil doit être installé sur un sol solide avec des mesures appropriées pour éviter le renversement. Dans le cas contraire, l'appareil peut se renverser ou provoquer des blessures corporelles.

-CAUTION: Use a power outlet with a ground wire to prevent electric shock. If the power outlet is not grounded, the grounding wire must be installed by qualified engineers.

-ATTENTION: Utilisez une prise de courant avec un fil de terre pour éviter les chocs électriques. Si la prise de courant n'est pas mise à la terre, le fil de mise à la terre doit être installé par des ingénieurs qualifiés.

-CAUTION: Please use the dedicated power supply indicated on the nameplate of this product. If the voltage exceeds $\pm 10\%$ of the rated voltage, an automatic voltage stabilizer must be installed for use. If the power cord needs to be extended, the cross-sectional area of the extension cord shall not be less than 2mm^2 and the length shall not be longer than 3m. The use of any other voltage or frequency power supply that is not marked on the nameplate may cause damage to electrical components or fire.

-ATTENTION: Veuillez utiliser l'alimentation électrique dédiée indiquée sur la plaque signalétique de ce produit. Si la tension dépasse $\pm 10\%$ de la tension nominale, un stabilisateur de tension automatique doit être installé pour l'utilisation. Si le cordon d'alimentation doit être rallongé, la section transversale de la rallonge ne doit pas être inférieure à 2 mm^2 et sa longueur ne doit pas dépasser 3 m. L'utilisation de toute autre

alimentation de tension ou de fréquence qui n'est pas indiquée sur la plaque signalétique peut endommager les composants électriques ou provoquer un incendie.

-CAUTION: It is necessary to install a separate overload and leakage protector for the power supply where the save box is located.

-ATTENTION: Il est nécessaire d'installer un protecteur de surcharge et de fuite séparé pour l'alimentation où se trouve le boîtier de sauvegarde.

-CAUTION: Before any repair or maintenance of the equipment is performed, be sure to disconnect the equipment from electrical shock or personal injury.

-ATTENTION: Avant toute réparation ou maintenance de l'équipement, assurez-vous de déconnecter l'équipement des chocs électriques ou des blessures.

-CAUTION: Make sure that you do not inhale the medicine or suspended particles inside or around the device during maintenance, otherwise it may cause health hazards.

-ATTENTION : assurez-vous de ne pas inhaler le médicament ou les particules en suspension à l'intérieur ou autour de l'appareil pendant la maintenance, sinon cela pourrait entraîner des risques pour la santé.

-CAUTION: If the device is not operating properly, remove the power plug. If you continue to operate under abnormal conditions, it may cause electric shock or fire. Please reserve enough space to ensure immediate power disconnection in the event of an emergency.

-ATTENTION: Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, retirez la fiche d'alimentation. Si vous continuez à fonctionner dans des conditions anormales, cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Veuillez réserver suffisamment d'espace pour assurer une déconnexion immédiate de l'alimentation en cas d'urgence.

-CAUTION: Once the storage box is powered off, it will take more than five minutes to turn it on again to avoid damage to the compressor or system. The mains plug must be unplugged during maintenance.

-ATTENTION: Une fois le boîtier de stockage éteint, il faudra plus de cinq minutes pour le rallumer afin d'éviter d'endommager le compresseur ou le système. La prise secteur doit être débranchée pendant l'entretien.

-CAUTION: When restarting the device after a power failure or when the power is turned off, check the device settings. Changes to the settings may damage the stored items.

-ATTENTION: Lors du redémarrage de l'appareil après une panne de courant ou lorsque l'alimentation est coupée, vérifiez les paramètres de l'appareil. Les modifications apportées aux paramètres peuvent endommager les éléments stockés.

-CAUTION: Gloves should be worn during repairs to prevent injury from sharp edges or corners.

-ATTENTION : des gants doivent être portés pendant les réparations pour éviter les blessures causées par des bords ou des coins tranchants.

-CAUTION: When removing the plug from the power outlet, hold the power plug firmly and do not pull the power cord. If you pull the cord by hand, it may cause electric shock or a short circuit that may cause a fire.

-ATTENTION: Lorsque vous retirez la fiche de la prise de courant, tenez fermement la fiche d'alimentation et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. Si vous tirez sur le cordon à la main, cela peut provoquer un choc

électrique ou un court-circuit pouvant provoquer un incendie.

-CAUTION: After cleaning the dust from the power plug, insert the plug firmly into the socket. Improperly plugged or plugged dust may cause heat or fire.

-ATTENTION: Après avoir nettoyé la poussière de la fiche d'alimentation, insérez fermement la fiche dans la prise. Une poussière mal obstruée ou obstruée peut provoquer de la chaleur ou un incendie.

-CAUTION: Before removing the device, unplug the power plug. Do not damage the power cord. Damage to the power cord may cause electric shock or fire.

-ATTENTION: Avant de retirer l'appareil, débranchez la prise d'alimentation. N'endommagez pas le cordon d'alimentation. Des dommages au cordon d'alimentation peuvent provoquer un choc électrique ou un incendie.

-CAUTION: When moving the equipment, be careful not to let the equipment fall over to prevent equipment damage or personal injury.

-ATTENTION: Lors du déplacement de l'équipement, veillez à ne pas laisser l'équipement tomber pour éviter d'endommager l'équipement ou de vous blesser.

-CAUTION: When the equipment is not used for a long period of time, unplug the power plug, otherwise it may cause electric shock, leakage or fire due to deterioration of the insulator.

-ATTENTION: Lorsque l'équipement n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la fiche d'alimentation, sinon cela peut provoquer un choc électrique, une fuite ou un incendie en raison de la détérioration de l'isolant.

-CAUTION: When storing toxic, hazardous, or radioactive objects, use this equipment in a safe area. Improper use may pose a risk to human health and the environment.

-ATTENTION: Lors du stockage d'objets toxiques, dangereux ou radioactifs, utilisez cet équipement dans un endroit sûr. Une mauvaise utilisation peut présenter un risque pour la santé humaine et l'environnement.

-CAUTION: Regardless of whether the device has the function of SMS alarm and remote alarm, staff must be on duty 24 hours a day or even 24 hours a day. Otherwise, equipment failure alarm may occur but cannot be found, resulting in deterioration of stored items due to overheating.

The user can adjust the temperature of the product within the allowable range according to his own needs.

-ATTENTION: Que l'appareil ait ou non la fonction d'alarme SMS et d'alarme à distance, le personnel doit être en service 24h/24 ou même 24h/24. Sinon, une alarme de défaillance de l'équipement peut se produire mais ne peut pas être trouvée, entraînant une détérioration des articles stockés en raison d'une surchauffe. L'utilisateur peut ajuster la température du produit dans la plage admissible en fonction de ses propres besoins.

-CAUTION: When adjusting, it is necessary to pay attention to conform to the national standard storage requirements, or to conform to the actual storage conditions of the stored articles, otherwise the articles may be stored and deteriorated.

-ATTENTION : lors du réglage, il est nécessaire de faire attention à se conformer aux exigences de stockage standard nationales, ou à se conformer aux conditions de stockage réelles des articles stockés, sinon les articles peuvent être stockés et détériorés.

-CAUTION: If the thermostat has a keypad lock function, after the adjustment is completed, the keypad must be locked to prevent the set temperature from drifting due to an incorrect operation, resulting in deterioration of stored items.

-ATTENTION: Si le thermostat dispose d'une fonction de verrouillage du clavier, une fois le réglage terminé, le clavier doit être verrouillé pour éviter que la température de consigne ne dérive en raison d'un mauvais fonctionnement, entraînant une détérioration des éléments stockés.

-CAUTION: Do not attempt to crack the password to enter the secondary setting menu during the use of the product, otherwise it may seriously affect the normal operation of the product, or even cause damage to the product.

-ATTENTION: N'essayez pas de déchiffrer le mot de passe pour accéder au menu de réglage secondaire pendant l'utilisation du produit, sinon cela pourrait sérieusement affecter le fonctionnement normal du produit, voire endommager le produit.

-CAUTION: Users should follow the product manual and the product's own reminder label and warning label to operate, otherwise it may be dangerous or cause performance degradation.

-ATTENTION : les utilisateurs doivent suivre le manuel du produit et l'étiquette de rappel et l'étiquette d'avertissement du produit pour fonctionner, sinon cela peut être dangereux ou entraîner une dégradation des performances.

-CAUTION: The product does not emit chemical substances, waste, or liquids.

-ATTENTION: Le produit n'émet pas de substances chimiques, de déchets ou de liquides.

-CAUTION: The product does not involve the storage life limit of the stored item.

-ATTENTION: Le produit n'implique pas la limite de durée de conservation de l'article stocké.

-CAUTION: The product does not involve prolonged or long-term use effects.

-ATTENTION: Le produit n'entraîne pas d'effets d'utilisation prolongés ou à long terme.

-CAUTION: The product itself is a non-disposable product that does not require aseptic sterilization.

-ATTENTION: Le produit lui-même est un produit non jetable qui ne nécessite pas de stérilisation aseptique.

-CAUTION: If the equipment is left unused in an unsupervised area for a long period of time, make sure that children do not approach the equipment and the door cannot be completely closed.

-ATTENTION: Si l'équipement reste inutilisé dans une zone non surveillée pendant une longue période, assurez-vous que les enfants ne s'approchent pas de l'équipement et que la porte ne peut pas être complètement fermée.

-CAUTION: Disposal of equipment should be carried out by appropriate personnel. Doors should be removed to prevent accidents such as suffocation.

-ATTENTION: L'élimination de l'équipement doit être effectuée par un personnel approprié. Les portes doivent être retirées pour éviter les accidents tels que la suffocation.

-CAUTION: Hold the handle to open or close the door to avoid pinching your fingers.

-ATTENTION: Tenez la poignée pour ouvrir ou fermer la porte afin d'éviter de vous pincer les doigts.

-CAUTION: If the product service time is close to the product life cycle, increase the frequency of maintenance, increase the frequency of inspection records, and regularly contact the manufacturer's

professional technical personnel for inspection.

-ATTENTION: Si la durée de service du produit est proche du cycle de vie du produit, augmentez la fréquence de maintenance, augmentez la fréquence des enregistrements d'inspection et contactez régulièrement le personnel technique professionnel du fabricant pour inspection.

-PROHIBITION: Do not install the device in a wet place or in a place that may splash in water. Otherwise, it may cause leakage or electric shock due to a reduced degree of insulation.

-INTERDICTION: N'installez pas l'appareil dans un endroit humide ou dans un endroit susceptible de provoquer des éclaboussures d'eau. Sinon, cela peut provoquer une fuite ou un choc électrique en raison d'un degré d'isolation réduit.

-PROHIBITION: This device must not be placed outdoors. If the device is wet with rain, it may cause leakage or electric shock.

-INTERDICTION: Cet appareil ne doit pas être placé à l'extérieur. Si l'appareil est mouillé par la pluie, cela peut provoquer une fuite ou un choc électrique.

-PROHIBITION: Do not install this equipment in a place where flammable or volatile materials are stored. It may cause explosion or fire.

-INTERDICTION: N'installez pas cet équipement dans un endroit où des matières inflammables ou volatiles sont stockées. Cela peut provoquer une explosion ou un incendie.

-PROHIBITION: Do not install this device with an acidic or corrosive gas, otherwise it may cause leakage or electric shock due to corrosion.

-INTERDICTION: N'installez pas cet appareil avec un gaz acide ou corrosif, sinon cela pourrait provoquer une fuite ou un choc électrique dû à la corrosion.

-PROHIBITION: If the container cannot be sealed, no corrosive substances such as acids and alkalis may be stored in this equipment, otherwise it may cause corrosion of components and electrical components inside the box.

-INTERDICTION: Si le conteneur ne peut pas être scellé, aucune substance corrosive telle que des acides et des alcalis ne peut être stockée dans cet équipement, sinon cela peut provoquer la corrosion des composants et des composants électriques à l'intérieur du boîtier.

-PROHIBITION: If the container cannot be sealed, do not store volatile or flammable substances in the device. Doing so may cause an explosion or fire.

-INTERDICTION: Si le récipient ne peut pas être scellé, ne stockez pas de substances volatiles ou inflammables dans l'appareil. Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

-PROHIBITION: Do not put the plastic bag in a place where children can get it because the plastic bag may cause a choking accident.

-INTERDICTION: Ne placez pas le sac en plastique dans un endroit où les enfants peuvent l'obtenir car le sac en plastique peut provoquer un accident d'étouffement.

-PROHIBITION: Do not splash water directly on the device. Doing so may cause electric shock or short circuit.

-INTERDICTION: Ne pas projeter d'eau directement sur l'appareil. Cela pourrait provoquer un choc

électrique ou un court-circuit.

-PROHIBITION: Do not use loose power cords with plugs. This type of power cord may cause fire or electric shock.

-INTERDICTION: N'utilisez pas de cordons d'alimentation desserrés avec des fiches. Ce type de cordon d'alimentation peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

-PROHIBITION: Users must not disassemble, repair or modify the equipment themselves. If any of the above operations is performed by an unauthorized person, fire or personal injury may result from improper operation.

-INTERDICTION: Les utilisateurs ne doivent pas démonter, réparer ou modifier eux-mêmes l'équipement. Si l'une des opérations ci-dessus est effectuée par une personne non autorisée, un incendie ou des blessures peuvent résulter d'une mauvaise utilisation.

-PROHIBITION: Wet hands should not be used to touch any electrical parts such as power plugs or any switches, as this may cause electric shock.

-INTERDICTION: Les mains mouillées ne doivent pas être utilisées pour toucher des pièces électriques telles que des prises de courant ou des interrupteurs, car cela pourrait provoquer un choc électrique.

-PROHIBITION: Do not insert metal objects such as nails or iron wires into any openings or gaps in the device or any outlets, otherwise electric shock or injury may occur due to accidental contact of the above objects and moving parts.

-INTERDICTION: N'insérez pas d'objets métalliques tels que des clous ou des fils de fer dans les ouvertures ou les espaces de l'appareil ou des prises, sinon un choc électrique ou des blessures peuvent survenir en raison d'un contact accidentel des objets ci-dessus et des pièces mobiles.

-PROHIBITION: Do not ground this equipment through gas, water pipes, telephone lines, or lightning rods. The above-mentioned grounding may cause electric shock when the pipeline is incomplete.

-INTERDICTION: Ne mettez pas cet équipement à la terre par le biais de gaz, de conduites d'eau, de lignes téléphoniques ou de paratonnerres. La mise à la terre mentionnée ci-dessus peut provoquer un choc électrique lorsque le pipeline est incomplet.

-PROHIBITION: Do not drill holes on the surfaces of this storage box, otherwise it will seriously affect the refrigeration performance of the storage box.

-INTERDICTION: Ne percez pas de trous sur les surfaces de cette boîte de rangement, sinon cela affectera sérieusement les performances de réfrigération de la boîte de rangement.

-PROHIBITION: Do not place containers or heavy objects with liquids on the device. If the item is dropped, it may cause injury to the person, and the flowing out of the liquid will cause the degree of insulation to decrease causing electrical leakage or electric shock.

-INTERDICTION: Ne placez pas de récipients ou d'objets lourds contenant des liquides sur l'appareil. Si l'article tombe, cela peut causer des blessures à la personne, et l'écoulement du liquide entraînera une diminution du degré d'isolation, provoquant une fuite électrique ou un choc électrique.

-PROHIBITION: Do not climb onto the device or place it on the device. Doing so can cause personal injury or damage to the device due to the device tipping over.

-INTERDICTION: Ne montez pas sur l'appareil ou ne le placez pas sur l'appareil. Cela peut causer des blessures ou endommager l'appareil en raison du basculement de l'appareil.

-PROHIBITION: Do not put glass bottles or fillings into the cabinet as it may be damaged by freezing.

-INTERDICTION: Ne mettez pas de bouteilles en verre ou de garnitures dans l'armoire car elles pourraient être endommagées par le gel.

-PROHIBITION: Do not touch stored objects directly with your hands. Direct contact with frozen objects or the inside of the equipment may cause frostbite. Wear antifreeze gloves.

-INTERDICTION: Ne touchez pas les objets stockés directement avec vos mains. Le contact direct avec des objets gelés ou l'intérieur de l'équipement peut provoquer des gelures. Portez des gants antigel.

-PROHIBITION: The patient does not control or affect the use of the product.

-INTERDICTION: Le patient ne contrôle ni n'affecte l'utilisation du produit.

-PROHIBITION: The product does not extract any substance from the patient, and the patient does not come into contact with the product in any form or approach the product.

-INTERDICTION: Le produit n'extrait aucune substance du patient, et le patient n'entre pas en contact avec le produit sous quelque forme que ce soit ou ne s'approche pas du produit.

-PROHIBITION: The product does not directly contact and store any biological material.

-INTERDICTION: Le produit n'entre pas directement en contact et ne stocke aucun matériel biologique.

-PROHIBITION: The product is not tested, measured, or analyzed.

-INTERDICTION: Le produit n'est ni testé, ni mesuré, ni analysé.

-PROHIBITION: The product is not agitated, crushed, etc.

-INTERDICTION: Le produit n'est pas agité, écrasé, etc.

-PROHIBITION: The product is not used in conjunction with or in conjunction with other materials, components, technologies, and medical devices, nor is it in contact with other medical devices. The product does not have the function of treatment or adjuvant therapy.

-INTERDICTION: Le produit n'est pas utilisé en conjonction ou en conjonction avec d'autres matériaux, composants, technologies et dispositifs médicaux, ni en contact avec d'autres dispositifs médicaux. Le produit n'a pas la fonction de traitement ou de thérapie adjuvante.

-PROHIBITION: The product does not have the function of improving the status of stored items or increasing the activity of stored items.

-INTERDICTION: Le produit n'a pas pour fonction d'améliorer l'état des articles stockés ou d'augmenter l'activité des articles stockés.

-PROHIBITION: Product non-quick freezing equipment is only used to store organs, materials or articles whose temperature is close to the set temperature of the product and does not have a complete life form. At the same time, it is required that the storage items have packaging or containment containers.

-INTERDICTION: L'équipement de congélation non rapide du produit est uniquement utilisé pour stocker des organes, des matériaux ou des articles dont la température est proche de la température de consigne du produit et n'a pas une forme de vie complète. Dans le même temps, il est nécessaire que les éléments de

stockage aient des emballages ou des conteneurs de confinement.

-PROHIBITION: The product does not have the functions of disinfection and sterilizing, does not possess absolute tightness, and the internal storage space is not vacuum or negative pressure. It does not have the effect of isolating radiation, and it must not directly store toxic, radioactive, and infectious substances.

-INTERDICTION: Le produit n'a pas les fonctions de désinfection et de stérilisation, ne possède pas d'étanchéité absolue et l'espace de stockage interne n'est pas sous vide ou à pression négative. Il n'a pas pour effet d'isoler les rayonnements et ne doit pas stocker directement de substances toxiques, radioactives et infectieuses.

-PROHIBITION: Do not pull, strain, process, step on, squash, damage, or distort the power cord at any time to avoid leakage or even fire due to loose or damaged power cords.

-INTERDICTION: Ne pas tirer, tendre, traiter, marcher dessus, écraser, endommager ou déformer le cordon d'alimentation à tout moment pour éviter les fuites ou même un incendie en raison de cordons d'alimentation desserrés ou endommagés.

-PROHIBITION: Foreign matter must not be placed in the door gap. Otherwise, condensation or even frost may occur on the door frame due to severe cooling of the door gap. This may cause the product's cooling performance to deteriorate.

-PROHIBITION: Aucun corps étranger ne doit être placé dans l'interstice de la porte. Sinon, de la condensation ou même du givre peuvent se produire sur le cadre de la porte en raison d'un refroidissement important de l'interstice de la porte. Cela peut entraîner une détérioration des performances de refroidissement du produit.

-PROHIBITION: The power cord must not be directly on the ground in order to avoid leakage accidents.

-INTERDICTION: Le cordon d'alimentation ne doit pas être directement sur le sol afin d'éviter les accidents de fuite.

-PROHIBITION: Do not put your hand into the cabin space or the top space of the cabinet, otherwise there is a risk of electric shock.

-INTERDICTION: Ne mettez pas votre main dans l'espace de la cabine ou dans l'espace supérieur de l'armoire, sinon il y a un risque de choc électrique.

-PROHIBITION: Do not store excessively high humidity items in the product. This can cause serious frosting on the evaporator and affect the cooling performance.

-INTERDICTION: Ne stockez pas d'articles à humidité excessivement élevée dans le produit. Cela peut provoquer un givrage important sur l'évaporateur et affecter les performances de refroidissement.

-PROHIBITION: Do not store excessively high-temperature items in the product (the temperature of the items should be close to the temperature inside the box), otherwise it will cause serious temperature rise inside the box and even cause other items stored inside the box to be damaged or deteriorated.

-INTERDICTION: Ne stockez pas d'articles à température excessivement élevée dans le produit (la température des articles doit être proche de la température à l'intérieur de la boîte), sinon cela provoquerait une augmentation importante de la température à l'intérieur de la boîte et même d'autres articles stockés à l'intérieur de la boîte. être endommagé ou détérioré.

-PROHIBITION: It is forbidden for personnel to enter this product, especially children, otherwise there may be casualties; if the equipment is left unattended for an extended period of time, it must be ensured that the child does not approach the equipment and the inside of the box cannot be completely closed.

-INTERDICTION: Il est interdit au personnel d'entrer dans ce produit, en particulier les enfants, sinon il peut y avoir des victimes ; si l'équipement est laissé sans surveillance pendant une période prolongée, il faut s'assurer que l'enfant ne s'approche pas de l'équipement et que l'intérieur de la boîte ne peut pas être complètement fermé.

-WARNING: Always ground (earth) the appliance to prevent electric shock. If the power supply outlet is not grounded, it will be necessary to install a ground by qualified engineers.

-AVERTISSEMENT: Toujours mettre à la terre (terre) l'appareil pour éviter les chocs électriques. Si la prise d'alimentation n'est pas mise à la terre, il sera nécessaire d'installer une mise à la terre par des ingénieurs qualifiés.

-WARNING: Keep all ventilation openings in the enclosure or, in the structure for building-in, clear of obstruction.

– **AVERTISSEMENT:** S'assurer que toutes les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées.

-WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

– **AVERTISSEMENT:** Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

-WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

– **AVERTISSEMENT:** Ne pas endommager le circuit FRIGORIFIQUE.

-WARNING: In order to reduce flammability HAZARDS the installation of this equipment shall only be carried out by a suitably qualified person.

– **AVERTISSEMENT:** Afin de réduire les DANGERS d'incendie, l'installation de cet appareil doit être effectuée uniquement par une personne dûment qualifiée.

-WARNING: Risk Of Fire Or Explosion. Flammable Refrigerant Used. To Be Repaired Only By Trained Service Personnel. Do Not Puncture Refrigerant Tubing.

– **DANGER:** RISQUE d'incendie ou d'explosion. Utilisation de FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE. À faire réparer uniquement par le personnel d'entretien qualifié. Ne pas percer les tubes FRIGORIFIQUES.

-WARNING: Risk Of Fire Or Explosion. Flammable Refrigerant Used. Consult Repair Manual / Owner's Guide Before Attempting To Install Or Service This Equipment. All Safety Precautions Must be Followed.

– **DANGER:** RISQUE d'incendie ou d'explosion. Utilisation de FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE. Consulter le manuel de réparation/guide d'entretien avant de tenter d'installer ou d'entretenir cet appareil. Toutes les précautions de sécurité doivent être suivies.

-WARNING: REFRIGERATING EQUIPMENT intended for laboratory use that contains an A3 refrigerant. This unit is intended for use in commercial, industrial, or institutional occupancy as defined in the Safety Standard for Refrigeration Systems, ANSI/ASHRAE 15.

– **DANGER:** Les APPAREILS DE REFRIGERATION destinés à une utilisation en laboratoire contenant un

FLUIDE FRIGORIGENE A3 doivent porter le marquage suivant: "Cet appareil est destiné à une utilisation commerciale, industrielle ou institutionnelle, comme défini dans la norme de sécurité des systèmes frigorifiques, ANSI/ASHRAE 15."

-CAUTION: Risk Of Fire Or Explosion due to Flammable Refrigerant Used. Follow Handling Instructions Carefully in Compliance with U.S. Government Regulations.

– **ATTENTION:** RISQUE d'incendie ou d'explosion en raison de l'utilisation de FLUIDE FRIGORIGENE INFLAMMABLE. Suivre attentivement les instructions de manipulation conformément aux règlements du gouvernement des États-Unis."

-WARNING: The installation and operating instructions shall indicate that component parts shall be replaced with like components and that servicing shall be done by the manufacturer's authorised personnel, so as to minimize the RISK of possible ignition due to incorrect parts or improper service.

– **DANGER:** Les instructions concernant l'installation et le fonctionnement doivent indiquer que les composants doivent être remplacés par des composants similaires et que l'entretien doit être effectué par le personnel autorisé par le fabricant, afin de réduire le plus possible le RISQUE d'inflammation possible dû à des parties ou à un entretien inadaptés.

IV. Handling Considerations

- ❖ Before carrying out the unpacking, handle the forklift, use a forklift, and do not use a cart.
- ❖ If using a forklift, insert it from the bottom of the storage box and move it.
- ❖ After removing the package, the storage box must be handled and it can be pushed by the caster.
- ❖ Note: The angle of inclination of the storage box must not be greater than 45° during handling.

V. Precautions of Using

- ❖ When the storage box is running, the surrounding of the storage box frame may become hot. This is not a malfunction. In order to prevent condensation around the box frame, a dew-proof tube was installed around the cabinet.
- ❖ Before putting the items into the storage box, make sure that the temperature inside the box has dropped sufficiently, and then put the items in batches to prevent the temperature from increasing.
- ❖ The temperature display value of the cryogenic storage box is the temperature at which the temperature sensing probe in the storage room is displayed. Although the displayed temperature sometimes differs from the actual temperature in the central part of the storage tank, it will gradually approach the actual temperature.

- ❖ Use a diluted, neutral detergent to clean the equipment (undiluted detergent will damage the plastic components. Refer to the detergent manual for the dilution method). Brushes, acids, gasoline, soap powder, polishing powder, or hot water should not be used to clean the storage tank because the above materials may damage the painted surface and plastic rubber parts. Be careful not to wipe the plastic rubber parts with volatile solvents such as gasoline.
- ❖ When the battery is tested for the first time or when it is not used for a long period of time, there may be a situation where the battery is discharged because its rechargeable battery has been completely discharged. This does not mean that a failure has occurred. In this case, to maintain sufficient battery capacity, it is necessary to keep the storage box running for about 7 days.
- ❖ After the storage tank is operated for a period of time, a layer of frost will form on the tank liner. If the frost layer is too thick, it will affect the cooling effect of the storage box and increase the power consumption. Therefore, when the frost layer reaches about 5mm at intervals, it should be defrosted.
- ❖ Before defrosting, please take the frozen items in the box and store it in another freezer to prevent the temperature inside the box from rising and damage the items.
- ❖ When the storage box is not used for a long time, the power should be turned off. Turn off the power switch and turn off the battery switch (if there is a corresponding switch).
- ❖ The speed should not be too fast every time the door is opened and closed, which may result in the difficulty of opening the door and the tightness of the door.
- ❖ The frequency of opening the door in use should not be frequent. It is better to open the door more than half an hour. Do not open the door more than 1 minute each time. Before closing the door, wipe the ice water on the door seal to ensure a good sealing effect. Failure to do so may cause the temperature in the storage tank to remain below the set temperature, and at the same time reduce the frost on the evaporator and the inner wall of the tank.
- ❖ When an electrical fault such as a leakage or a short circuit occurs during use, immediately disconnect the power supply.
- ❖ After installing or moving the storage box for the first time, after it is in place, it needs to stand for 6 hours and then be powered on.
- ❖ When there are many items, please store them in batches. Each batch must not exceed one third of the volume of the cabinet. After placing the first batch of articles, wait for the temperature to stabilize before putting in the second batch to ensure that the temperature inside the box is stable.
- ❖ During the use of the storage box, if the door is opened for too long, the external hot air will enter the box, causing a high temperature alarm. This is a normal phenomenon. Please pay attention to reducing the time and frequency of door opening and closing as much as possible.
- ❖ In order to prolong the life of the storage box and reduce energy consumption, it is recommended that the temperature of the storage box is set between -70°C and -80°C.
- ❖ If the freezer does not cool after 2 to 3 hours of power-on, unplug it and contact the customer as soon as possible.
- ❖ Clean the condenser dust every three months to ensure the normal operation of the equipment.
- ❖ In the event of an alarm failure or other failure, please refer to the instruction manual to clear the fault according to the prompts on the display board. If you can not eliminate the fault by yourself, please do

not disassemble it. Please contact the after-sale maintenance personnel to help eliminate the fault.

VI. Ambient Conditions

- ❖ Ambient temperature: 10°C-32°C. And the maximum temperature is no more than 32°C. The ideal temperature is 18 to 25°C. If necessary, an air conditioning system should be used.
- ❖ Ambient humidity: Maximum relative humidity 80% for temperature up to 32°C, the humidity should be less than 60% RH.
- ❖ Avoid large amounts of dust.
- ❖ Avoid mechanical swing or vibration.
- ❖ The elevation shall not exceed to 2000m.
- ❖ The voltage fluctuation range shall not exceed $\pm 10\%$ of the rated voltage.
- ❖ Cannot be installed in a narrow and confined space. The door of the room should not be smaller or lower than the product. At least the normal entry and exit of the product should be ensured so as to avoid maintenance difficulties when the machine fails. The machine cannot be repaired in time, resulting in storage of goods. The damage.
- ❖ Please check the operating voltage before use, voltage instability should consider the use of regulator voltage regulator. To ensure that the normal input voltage is stable at **rated voltage $\pm 10\%$** , the regulator power should be greater than 3kW.
- ❖ This equipment should ensure reliable grounding.
- ❖ If the power outlet is equipped with a grounding wire, check that the grounding is good before use.

CAUTION:

- ❖ Because the cryogenic equipment is more sensitive to the ambient temperature. If it is installed in an environment other than the above, the machine will not operate normally. Please use it after improving the environment.
- ❖ It is forbidden to install this equipment in an open air environment. When the storage tank is exposed to rain, it may cause leakage or electric shock.


VII. Installation

Remove all packing materials and packing tapes

Open the door to ventilate the appliance. If the outside panels are dirty, clean them with soft fabric plus diluted neutral detergent. (Undiluted detergent can damage the plastic components. For the dilution, refer to the instruction of the detergent). After the cleaning with the diluted detergent, always wipe it off with a wet cloth. Then wipe off the panels with a dry cloth.

Adjust the level feet


Turn the level feet clockwise to extrude the level feet, so as to contact the floor. Make sure to keep the appliance at horizontal status.

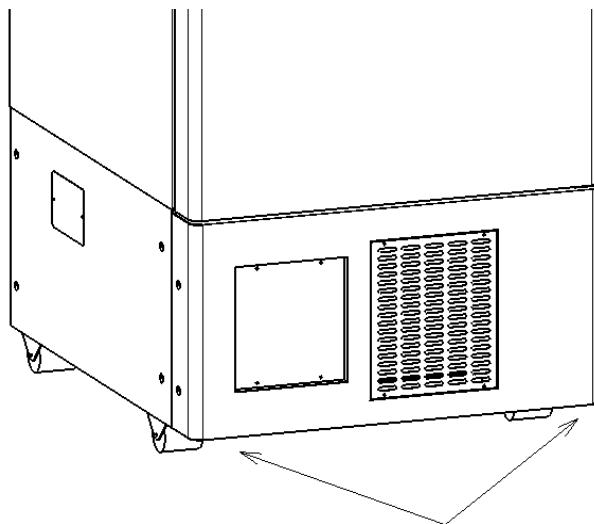

Level feet

Fixed appliance

Two fixed handles are installed at the back panel of the cabinet. Fix the cabinet on the wall with fixed handle and rope or chain.

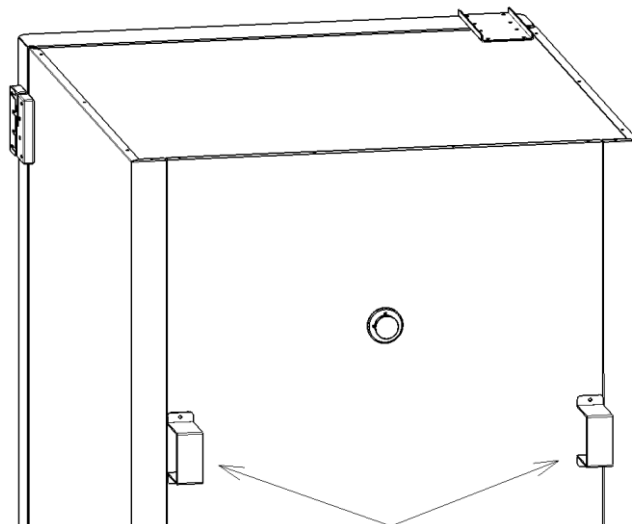

WARNING


- ❖ Use a power supply outlet with ground (earth) to prevent electric shock. If the power supply outlet is not grounded, it is necessary to install a ground by qualified engineers.
- ❖ Never ground the appliance through a gas pipe, water supply pipe, telephone line or lightning rod. Such grounding may cause electric shock in the case of an incomplete circuit.
- ❖ After the power is turned on, the power plug must be accessible to facilitate unplugging the power cord in an emergency. Any item must not cover the vent of the cryogenic storage box.

VIII. Start-up of Appliance

Follow the procedures for the test and formal operations of the appliance:

- ❖ Keep the device stand for 24 hours at least before turn on
- ❖ Connect the power cord to the dedicated socket having appropriate rating and then turn on the power switch.
- ❖ Press the MUTE button to stop the alarm If the alarm sounds.
- ❖ Set the storage temperature as needed.
- ❖ Check the temperature in the cabinet if reached the setting temperature.
- ❖ Observation of the cabinet has normal opening and stopping for more than 24 hours, proof of normal performance of the cabinet.
- ❖ After confirmed the above, put a small amount of precooled articles (-40°C) into appliance to prevent temperature and the time interval at least 2 hours.
- ❖ When the Power off, then power on, the device will revert to the temperature set before the power off. The setting value of temperature and alarm temperature in the box is in Nonvolatile flash memory.
- ❖ Before placing the item in storage, confirm that the required temperature of the item is in accordance with the temperature range of the equipment, Prevent damage to items
- ❖ As a result of refrigeration inertia, the actual display of this product temperature and set the temperature has a certain difference (set the temperature of the lower the difference between the smaller the greater the contrary), this is normal
- ❖ All cabinet are storage equipment, is strictly prohibited to put too much of the relatively hot items, will cause the compressor for a long time non-stop, temperature does not drop and easy to cause compressor damage. Do not use appliances that have not been approved by the manufacturer within the enclosure.

IX. Components

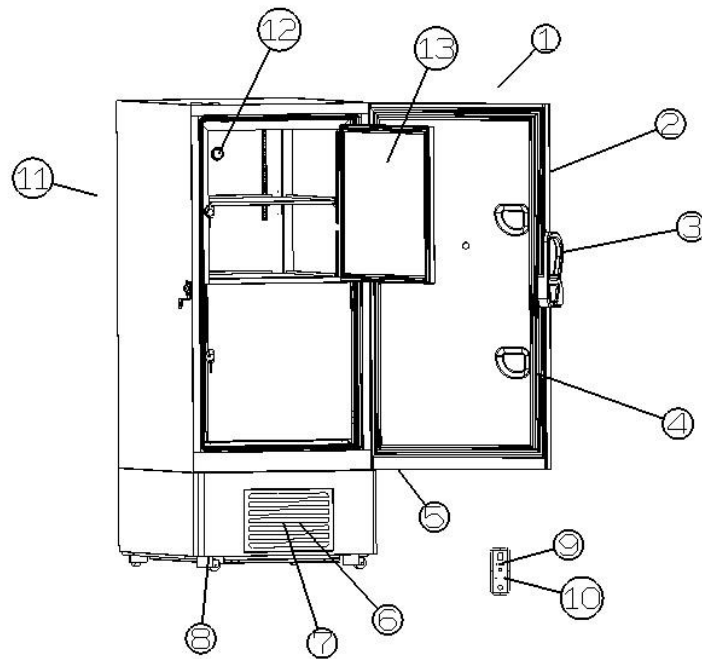


1. **Control panel** (on the wall of the external door): Display the temperature setting and indication of operating status.
2. **External door**: To open the door, grip the handle. When closing the door, please completely lock the external door handle.
3. **Handle**: Hold the handle to open and close the external door.
4. **Magnetic door gasket**: This provides a tight door seal and prevents cold air leak, please keep it clean.
5. **Door switch**: Detect the status of the external door (Open/Close).
6. **Air intake vent grille**: Do not block it to keep proper cooling performance.
7. **Condensing filter** (behind the grille): The filter can protect the condenser from dust. The dusty filter may cause damage for the refrigerating appliance. Clean the filter monthly.
8. **Caster**: The height of the freezer can be adjusted by this screw type foot. Keep the appliance horizontal during installation. Make sure the rubber part of the casters contact the floor.
9. **USB (5V/1W/ rating 2.0) port**: For data download of recent 10000 temperature records. Can only be used for data transmission, can not be used for charging.
10. **Remote alarm terminal**: It is used for sending the alarm to the remote location.
11. **Fixed handle** (at the back side): 2 fixed handles are used for keeping the gap between the appliance and the wall.
12. **Access port** (at the rear and bottom): This is used for leading a cable and sensor of a measuring appliance, or nozzle of back-up system to indoor.
13. **Inner door**: The operation of the inner door should be quick to minimize the temperature rise indoor. Lock the door latch completely when the door is closed. The door is removable for cleaning or defrosting. See page 28 "Routine maintenance".

X.System Settings


- ✓ Enter the language selection interface when the device is powered on.
- ✓ After selecting the language interface, the selected background color is green, unchecked is a background black, click to enter the next step.



- ✓ After selecting the language, enter the initial setting of the system. The initial setting includes the current time setting and the system temperature unit setting.

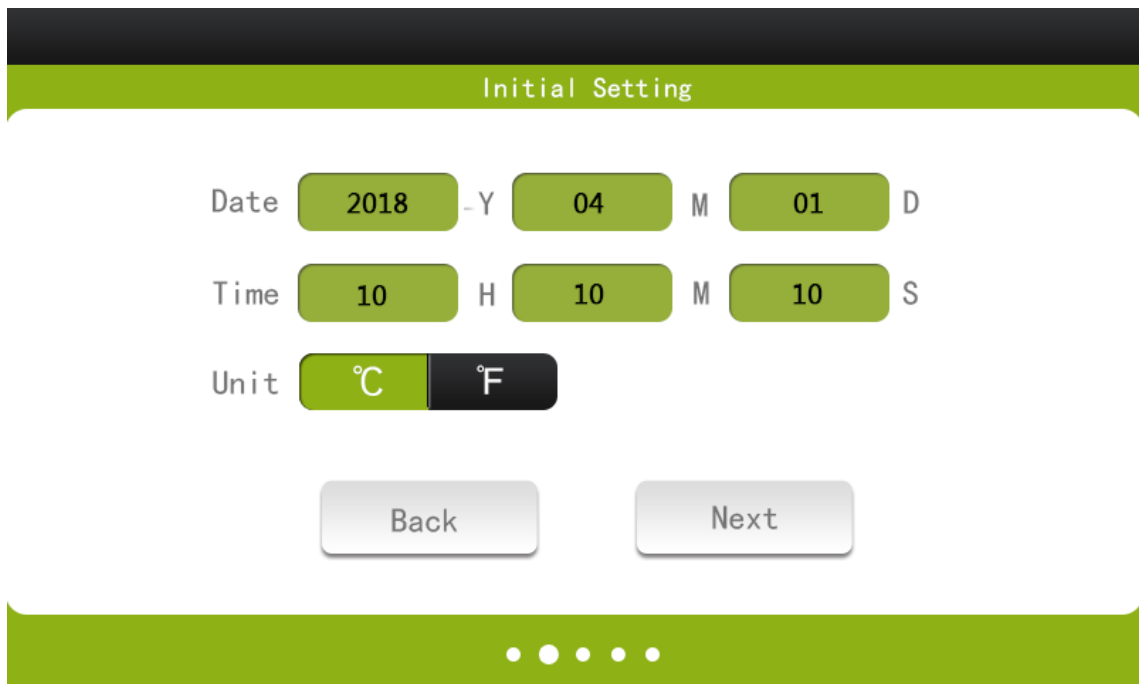


- ✓ Click the time displayed in the interface, and the time setting interface will be displayed.

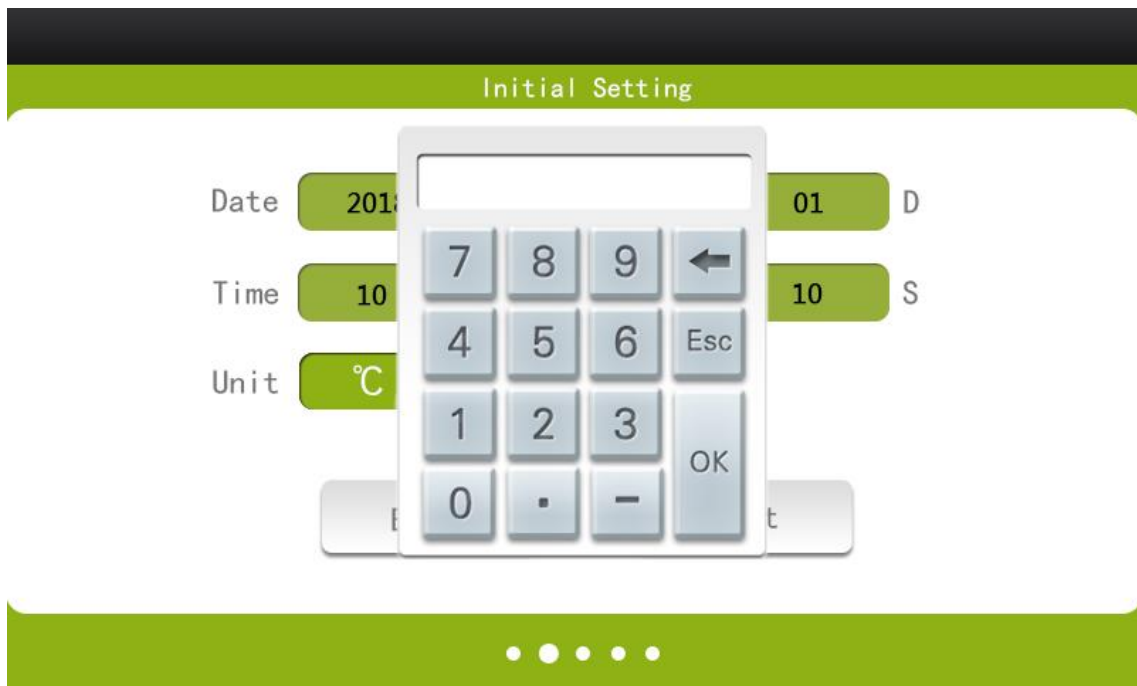

- ✓ Then enter the current time and click OK to complete the current time setting. The screen returns to the initial setup interface, if the current time is correct can directly carry out the system temperature unit setting, directly click on the interface of "°C" and "°F" for temperature unit selection, selected a background color is green, unchecked is a background color black(The following operations usually selected background is green, not selected background is black, no longer specifically described).Click "Next "when the initial time and temperature unit setup is complete.

- ✓ Enter system mode Setup when initial setup completes.

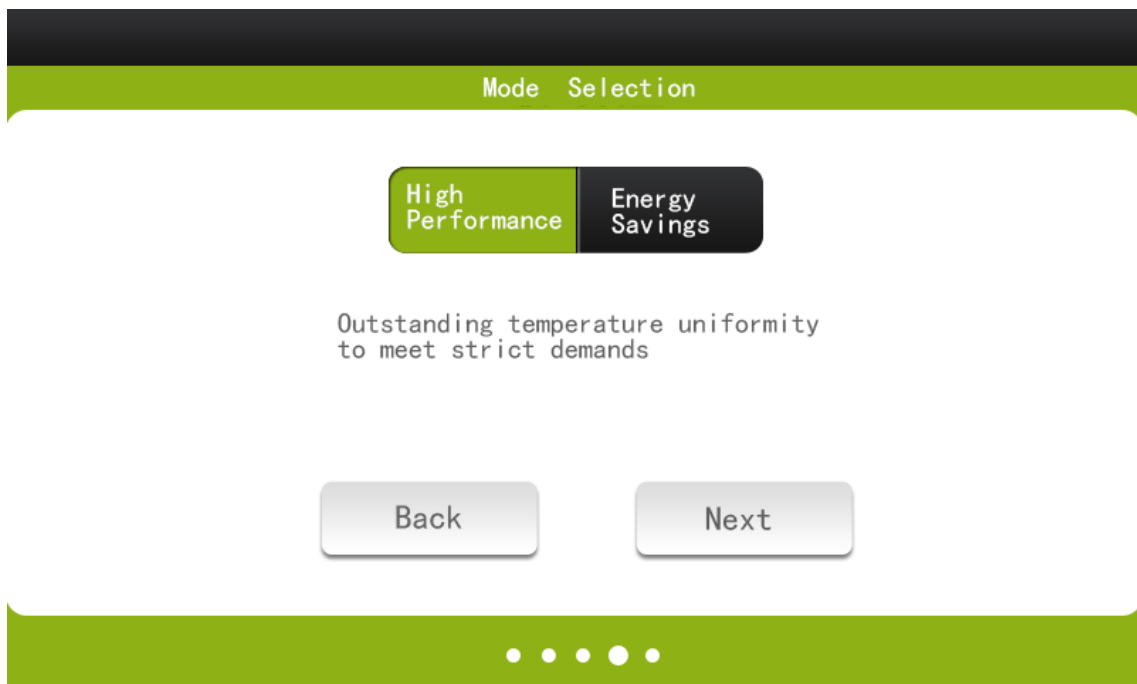

- ✓ There are two types of performance modes, high-performance mode and energy-saving mode, which

can be arbitrarily selected. Performance mode can be changed after entering the system. After setting the performance mode, click “Next” to proceed to the next step.

- ✓ Licensing mode settings when the performance mode setting is complete.

Mode Selection

Open Access Authorization

All functions (including settings) are open to any users.

Back Next

- ✓ In the authorization mode, there are two modes: Open Access and authorization mode. After selecting the authorization mode, it cannot be changed to open access,(If you need to change, you can make changes in the login interface after you continue to the system).
- ✓ Choose open access and click “Next” to enter the system;Choose the licensing mode and click Next to enter the authorization password.

Password Setting

Enter Password

Back Done

- ✓ Enter the correct authorization password in this interface to enter the system. (The initial authorization


password is 123456. This password can be modified on the login interface after entering the system.)

CAUTION:

After using the authorization mode to enter the system, some parameters need to use the authorization password to enter. In the case of the authorization mode, the device can only select the authorized mode to enter after power-off and restart. To return to the open access, you need to switch under the login module. In the open access, after the device is powered off and restarted, it can select whether to use the open access or the authorized mode to enter.

XI. Control Panel Introduction

◆ Main page function introduction:

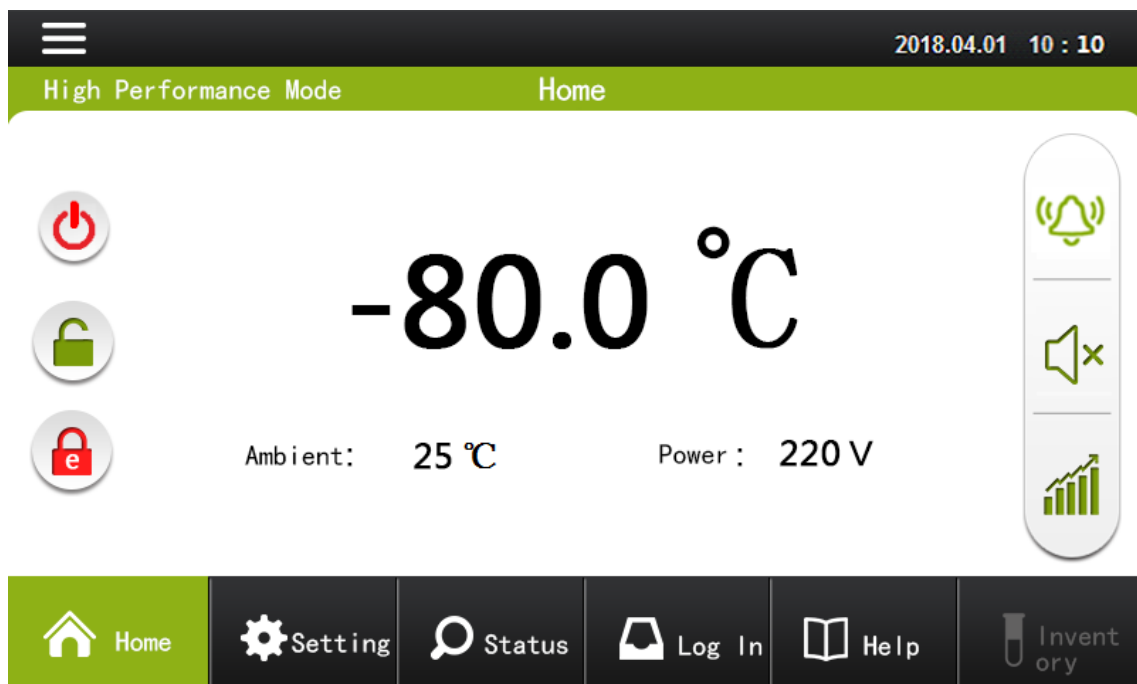

✓ **Home Page Middle area for display area:**

- ✓ The center of the home page shows the current temperature in the cabinet, the lower left corner of the current ring temperature, the lower right corner of the current power supply voltage, the upper-left corner shows the current system performance mode, the upper-right corner shows the current system time.


✓ **The left side of the homepage is the unlocked area:**

- ✓  **Unlock:** Unlock the screen before you can operate, if unlocked after 3 minutes without any operation, automatic lock screen. This icon is red when the screen is locked.
- ✓  **Electronic Lock:** The symbol appears when an electronic lock is started. Press the electronic lock, eject the keyboard, enter the electronic lock password and open the electronic lock. The key is green when the electronic lock is untied. This icon is not on the screen when the electronic lock feature is not started. (This function needs to be equipped with the door electronic lock, and this function is off by default without the selected model)

- ✓  **Power switch:** When the product power switch is not turned on, this icon is green. The touch icon turns red, indicating that the product is powered on.
- ✓ **The right side of the homepage is the status display query area:**
- ✓  **Operating status:** When the device is operating normally, the color is green. Click to query all alarm information.
- ✓  **Operation status:** When the device operation is abnormal, the color is yellow and flashes and beeps. The home display area will display the corresponding alarm icon and instructions
- ✓  **Operating status:** When the equipment operation fails, the color is red and it flickers and an alarm sounds. The home display area will display the corresponding alarm icon and instructions
- ✓  **Silence:** Press the “mute” button when alarming, and the buzzer stops.
- ✓  **History curve:** Enter the history curve page.




- ✓  **Data download:** Click the icon to start downloading data.

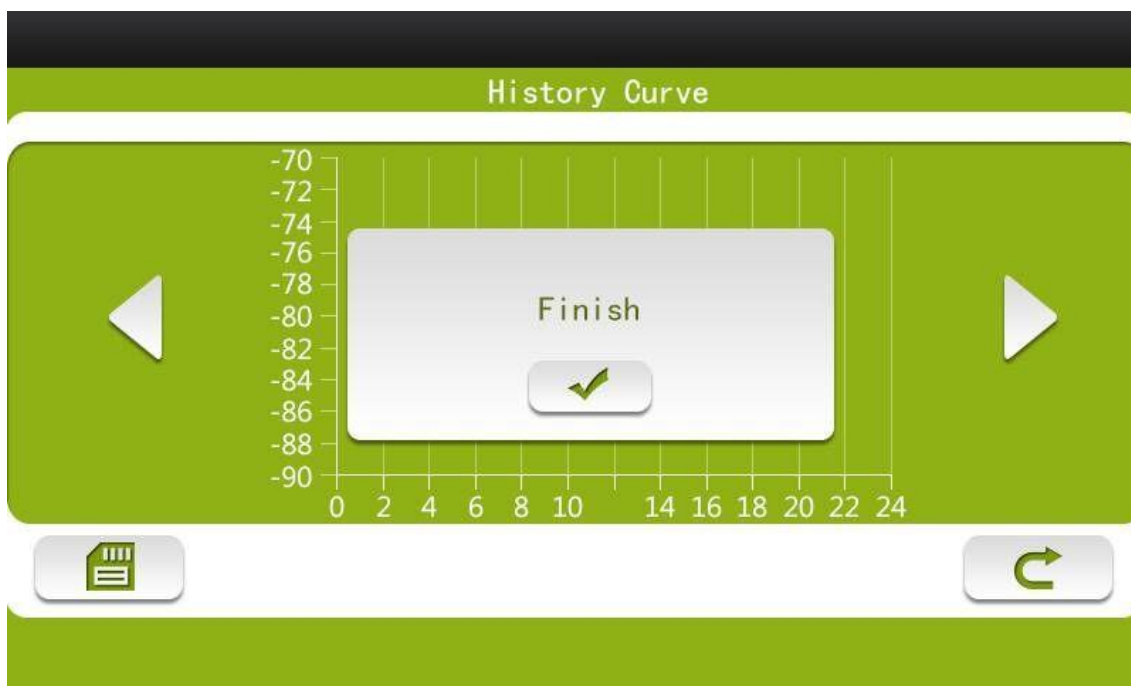

This page appears to indicate that the data download is complete, and you can just pull out the U disk at this time.

◆ Settings page function introduction:

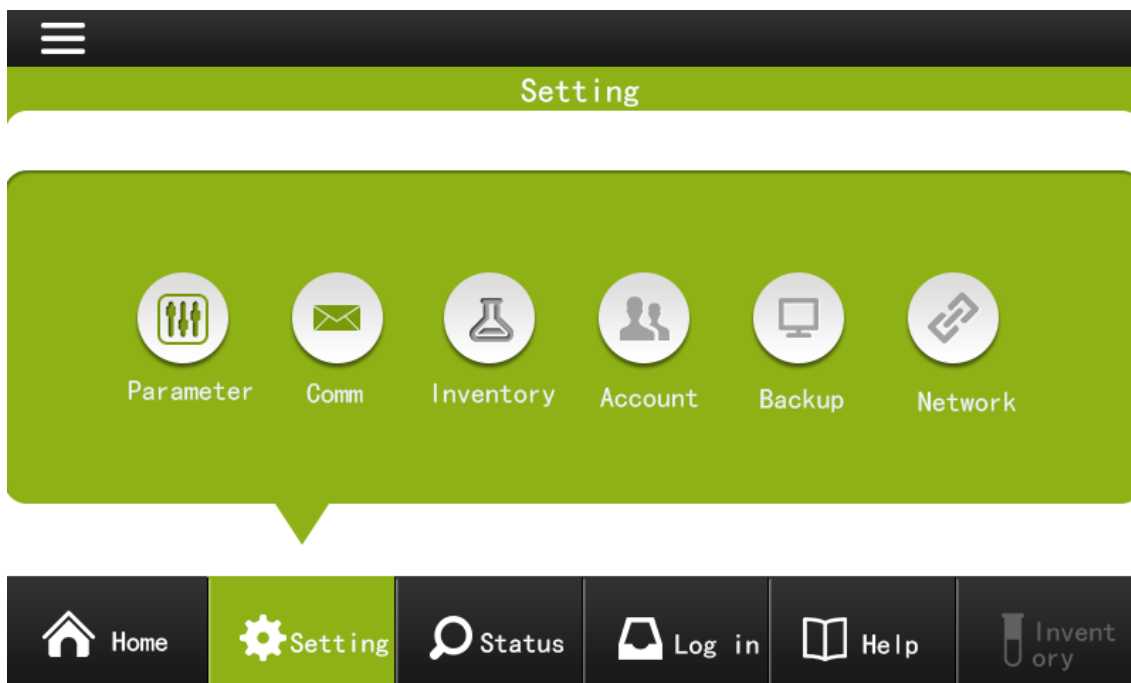

- ✓ **Parameter setting:** Set the temperature and alarm in the cabinet
- ✓ **Communication settings:** Set up the device SMS alarm function. (Optional SMS alarm function is available)

◆ Introduction to parameter setting page:

The screenshot shows the 'Parameter Setting' interface. At the top right, the date and time are '2018.04.01 10.10'. The title 'Parameter Setting' is centered in a green bar. Below are several settings:

- Set Temp:** -80 °C (with a yellow 'x' icon)
- Modification:** 2 °C (with a yellow 'x' icon)
- High Alarm:** -70 °C (with a yellow 'x' icon)
- Low Alarm:** -90 °C (with a yellow 'x' icon)
- Data Interval:** 5 min (with a yellow 'x' icon)
- Mode:** High Performance (selected) and Energy Saving (disabled)
- Brightness:** 50 (with a yellow 'x' icon)
- E- Lock Password:** A lock icon with a green 'e' inside.

At the bottom, there is a 'Confirm' button and a circular arrow icon.

CAUTION:

When using licensing mode to enter the system, click on the parameter settings to enter the authorization password, the correct password can enter the parameter settings; When entering the system in open access mode, click enter parameter setting to enter the parameter setting page directly

- ✓ **Set temperature:** set the temperature in the cabinet.
- ✓ **Modification:** Calibration of sensor temperature measurement. The symbol for the value indicates whether the cabinet temperature displays the sensor's temperature plus (positive) or minus (negative) offset.
- ✓ **High Alarm :** When the temperature of the cabinet temperature is higher than its set value, when the duration exceeds the set alarm interval, the high temperature alarm information appears.
- ✓ **Low Alarm :** When the temperature of the cabinet temperature sensor is lower than its set value, when the duration exceeds the set alarm interval, the high temperature alarm information appears.
- ✓ **Data storage interval:** The data storage interval can be set. The data storage interval can be set to 5min or 15min.
- ✓ **Mode selection:** Change the system's performance mode.
- ✓ **Screen Brightness:** Changes the brightness of the current screen.
- ✓ **E- lock password:** Modify the password that opens the electronic lock. (Optional electronic lock function is effective).

CAUTION:

- ✓ **The factory default temperature setting is -80°C.**
- ✓ **The temperature controller has been set default parameters when leaving the factory. Please do not change other default parameters.**

◆ Introduction to Communication Settings(Optional function,and only supported by mainland China):

Communication Setting

✉ Message Alarm

Cellphone 1 X

Cellphone 2 X


✉ Alarm Interval

Min X

Confirm

- ✓ When using licensing mode to enter the system, click on the parameter settings to enter the authorization password, the correct password can enter the communication settings.
- ✓ When entering the system in open access mode, click enter parameter setting to enter the parameter setting page directly.
- ✓ Mobile 1: Set the first phone number to receive the alarm message.
- ✓ Mobile 2: Set a second phone number to receive the alarm message.
- ✓ Alarm interval: Set the interval time of receiving the alarm message after the alarm occurs.

◆ **Status page function introduction:**

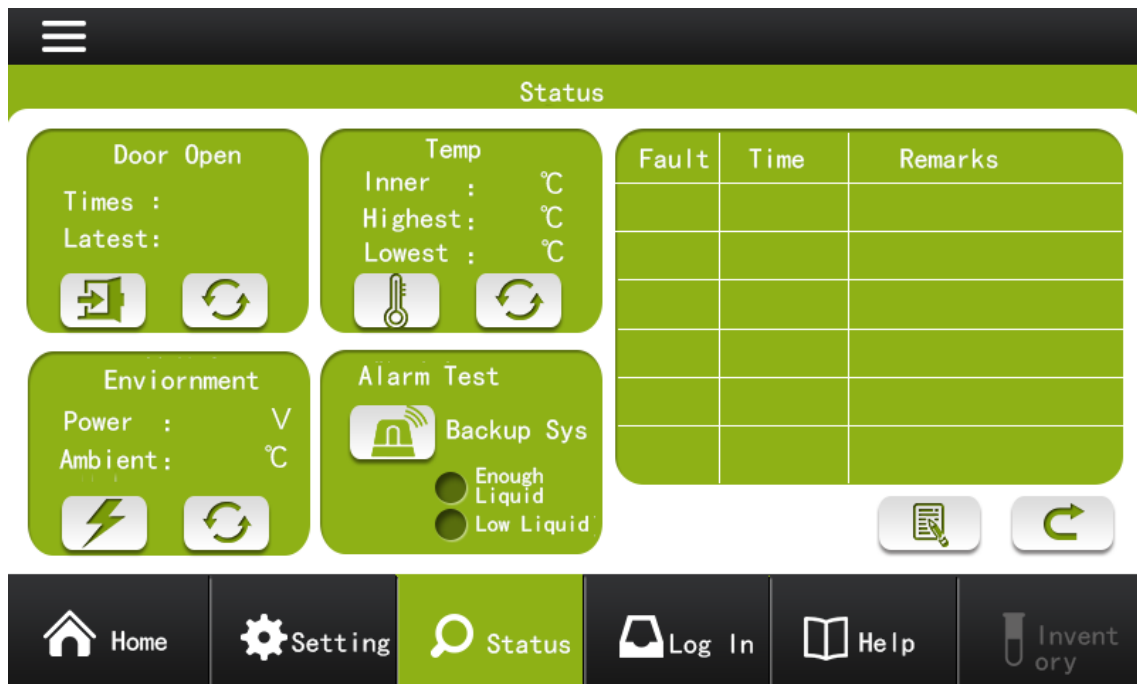

- ✓ The left area of the status module mainly displays the current information of the devices.


■ **Door:**

- ✓ The door opening information mainly records the number of door opening and the latest opening time after the device is used.
- ✓  Open door information refresh: Click the refresh button to count the number of times of opening again, and the time information of opening count is reset.

■ **Temp:**

- ✓ The temperature information mainly records the temperature in the current cabinet and the highest and lowest temperature in the last day.
 - ✓  Refresh temperature information: Recalculate the highest/lowest temperature in the last day.
- Environmental information mainly records the current power supply voltage and ambient temperature.
- ✓  Click to enter the cabinet running status interface.


◆ **Introduction to the function of running state:**

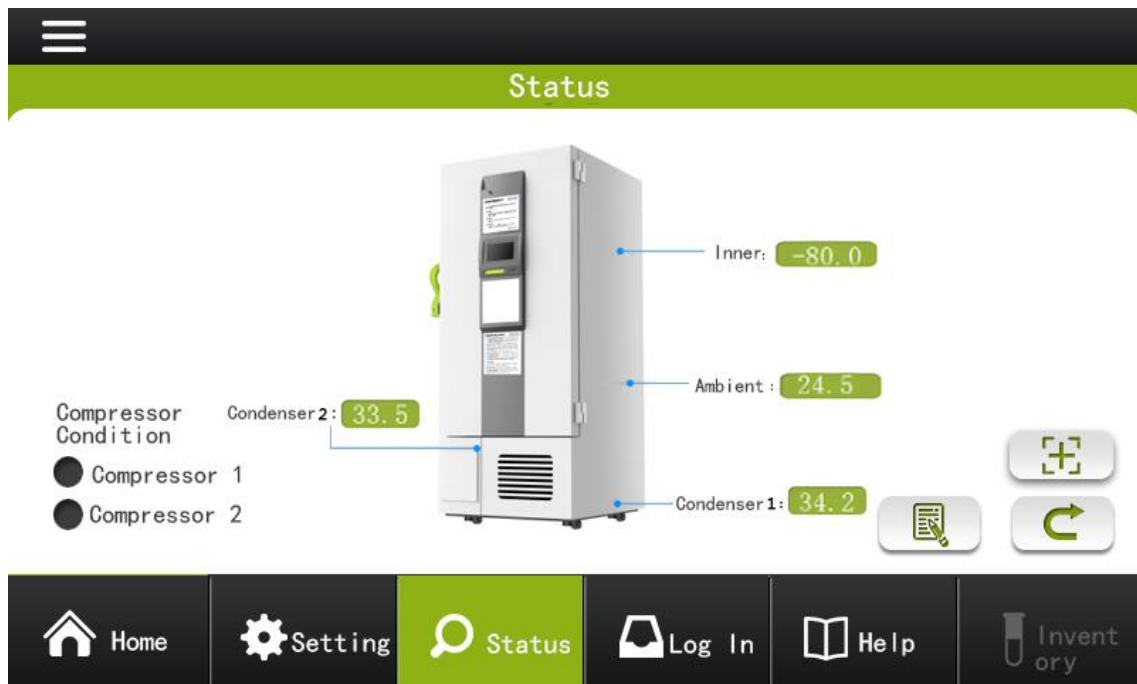

- ✓ **Compressor status:** The compressor icon is green when the compressor running; the compressor icon is gray when the compressor stops
- ✓ **Inner:** Displays the current temperature inside the cabinet.
- ✓ **Ambient:** Displays the current ambient temperature.
- ✓ **Condenser 1:** Displays the current condenser 1 temperature.
- ✓ **Condenser 2 / Heat Ex-changer:** Displays the temperature of condenser 2 or heat ex-changer.
- ✓  Enter the event information interface.
- ✓  Enter the screen calibration interface. (The screen is calibrated at the factory and the screen may cause the device to not be used, please do not operate)
- ✓  Return status interface.

- **Environment**
- ✓  Refresh the environment information: Refresh the current environment information.
- **Alarm test**
- ✓ Alarm test can enter the device alarm test interface, understand and test equipment alarm function.
- ✓  Alarm Test: Click to enter the device's alarm test interface.

◆ Alarm test page function introduction:

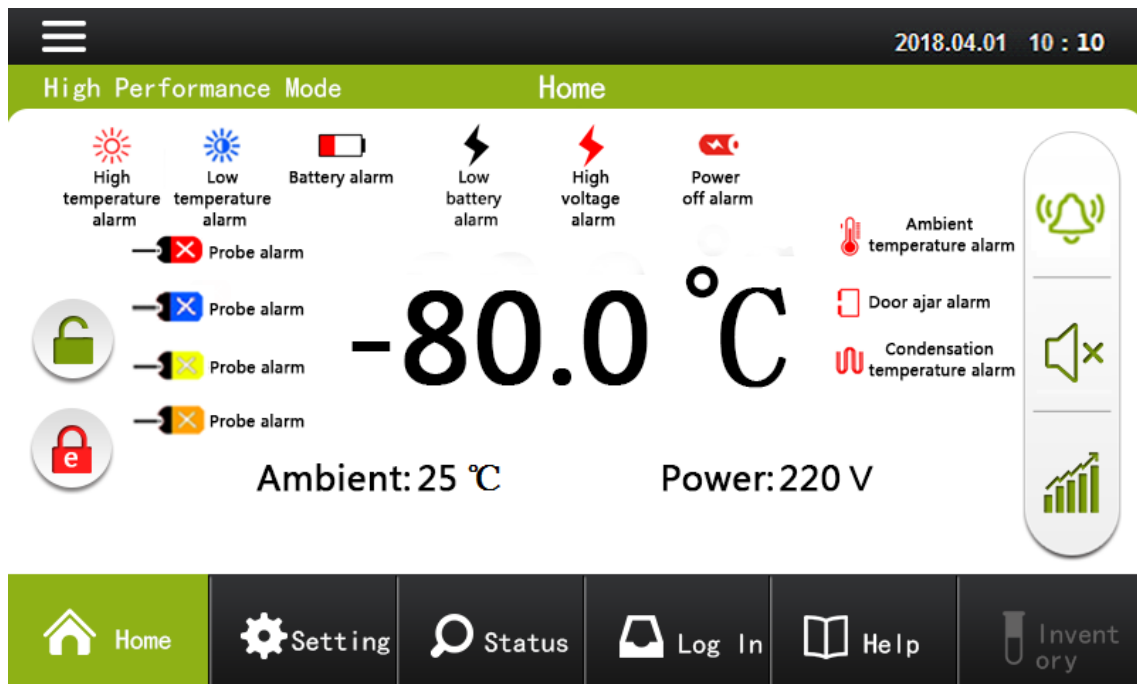

Click on the alarm test to start entering the alarm test:

- ✓ **Step 1:** the interface switches to the main interface for 10 seconds.
- ✓ **Step 2:** Verify the alarm status in order: high temperature alarm, low temperature alarm, door open alarm, and battery power anomaly alarm. At the same time, the alarm sound and running status icon turn yellow and blink.
- ✓ **Step3:** Verify status in order: When Probe failure, high ambient temperature, abnormal input voltage, the alarm sound and running status icon turn red and blink.
- ✓ **Step 4:** The main interface display alarm test completed, the page automatically switch back to the home page interface.
- **The right area of the status bar mainly displays some device alarm information.**
- ✓ In the fault list, the 6 most recent alarm messages will be displayed. The fault bar shows the alarm icon. The time bar shows the alarm occurrence time. The remark column shows the specific alarm content.



Enter the event information interface to view all the alarm messages that appear on the device.



Return to home page interface.

◆ Login interface function introduction:



CAUTION:

Access to the system requires an authorization password to enter the login interface regardless of the mode of use.

- ✓ **Full access:** Click to enter normal mode.
- ✓ **Authorization mode:** Click to enter the authorization mode.
- ✓ **Change Password:** Click to modify the authorization password.

XII. Remote Alarm Terminal

- ✓ The remote alarm terminal is installed on the lower left side of the device. The alarm signal is output from this terminal.
- ✓ MAX voltage: 33V.
- ✓ Terminal output: the alarm terminals are in open circuit normally, and in closed circuit if there's alarm.

CAUTION:

The alarm will be activated when the power cord falls down or the power supply cut off.

XIII. Compressor Delay Start Time Change

In order to drop the power load after power recovery, the delay of the compressor I could be modified.

CAUTION:

- ✓ The delay during I and II compressor can't be modified.
- ✓ When the power capacity is enough, it is not necessary to modify the delay.

XIV. Alarm and Safety Features

Alarm and safety features	status	Instruction	buzzer	Safe operation
Main sensor alarm	When the main probe in the cabinet is short-circuited or broken	 Probe alarm	Ring	Remote alarm activates
Ring temperature sensor alarm	When the ring temperature probe in the cabinet is short-circuited or broken	 Probe alarm		
Condensate Sensor alarm	When the condenser probe in the cabinet is short circuit or a broken circuit	 Probe alarm	Ring	
Heat exchange sensor alarm	When the Heat exchange probe in the cabinet is short circuit or a broken circuit	 Probe alarm	Ring	
Please clean the dust net	When the condensing filter is blocked or cooling fan is failure	 Condensation temperature Alarm	Ring	
Please check whether the outer door is closed	When the door opens more than a period of time	 Door ajar alarm	Ring	
High temperature alarm, please confirm whether to put a lot of items at one time or open the door too long	The temperature in the cabinet is too high	 High temperature alarm	Ring	
Low temperature alarm, please check the setting parameters are correct	The temperature in the cabinet is too low	 Low temperature alarm	Ring	Remote alarm activates

The power supply voltage is too high, please check the power supply voltage is normal	High voltage alarm		Ring	
The power supply voltage is too low, please check the power supply voltage is normal	Low voltage alarm		Ring	
Power supply is abnormal, please confirm the power failure or bad contact	Power abnormal alarm	 Power off alarm	Ring	
The battery is abnormal. Please keep it running for 24 hours. If the alarm is not cleared, replace the battery.	Low battery alarm		Ring	
The ambient temperature is too high, please check whether the product is well-ventilated around, such as in the summer, please confirm whether the air conditioning system is operating normally	Ambient temperature over 32 °C	 Ambient temperature alarm	Ring	

The device has the alarm and safety functions shown in the table below and has a self-diagnostic function.

CAUTION:

When the power is switched off after power off, the device will resume operation with the temperature setting before power off. The set points for the temperature in the cabinet and the alarm temperature are stored in the non-volatile flash memory.

XV. Routine Maintenance


WARNING

- Warning: Always disconnect the power supply to the appliance prior to any repair or maintenance in order to prevent electric shock or injury.
- Make sure you will not inhale medicine or suspended particles around the appliance at the time of maintenance; these possibly be harmful to your health.

Clean the Cabinet

- Please clean the cabinet once a month. Periodical cleaning keeps the appliance looking new.
- Use a dry cloth to wipe off small amounts of dirt on the outside and inside of the appliance and all accessories, If the appliance is dirty, clean it with a diluted neutral dish washing detergent. (Undiluted detergent can damage the plastic components. For the dilution, refer to the instruction of the detergent.)After the cleaning with the diluted detergent, always wipe it off with a wet cloth. Then wipe off the cabinet or accessories with a dry cloth.
- Never pour water onto or into the appliance. Doing so can damage the electric insulation and cause failure.
- The compressor and other mechanical parts are completely sealed and the appliance requires absolutely no lubrication.
- The fan is installed behind the compressor, so please be very careful when insert the hand in this part.

Clean Condenser Filter

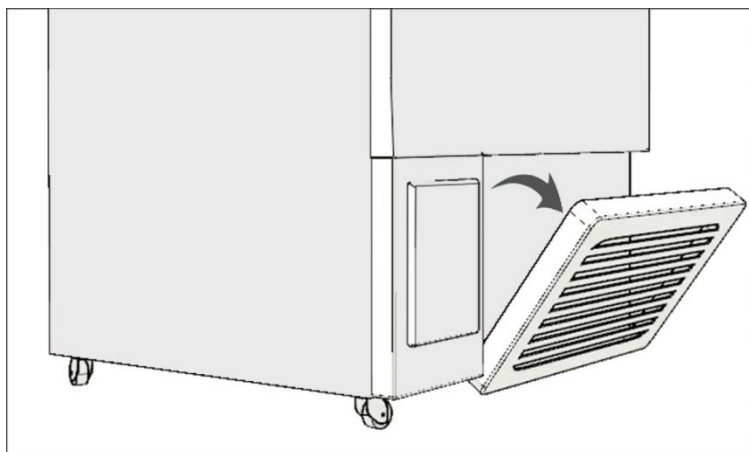


Filter replacement instructions, Please following the steps to clean the filter:

- As shown in the picture, pull out the flip
- Get out of the filter net
- Clean the strainer with water and dry it
- Put the filter back in place and install the flip.
- Check if the alarm has been canceled if the condenser temperature alarm occurs before

CAUTION:

Do not touch the condenser directly when cleaning the filter. The hot surface may be damaged.

Defrosting

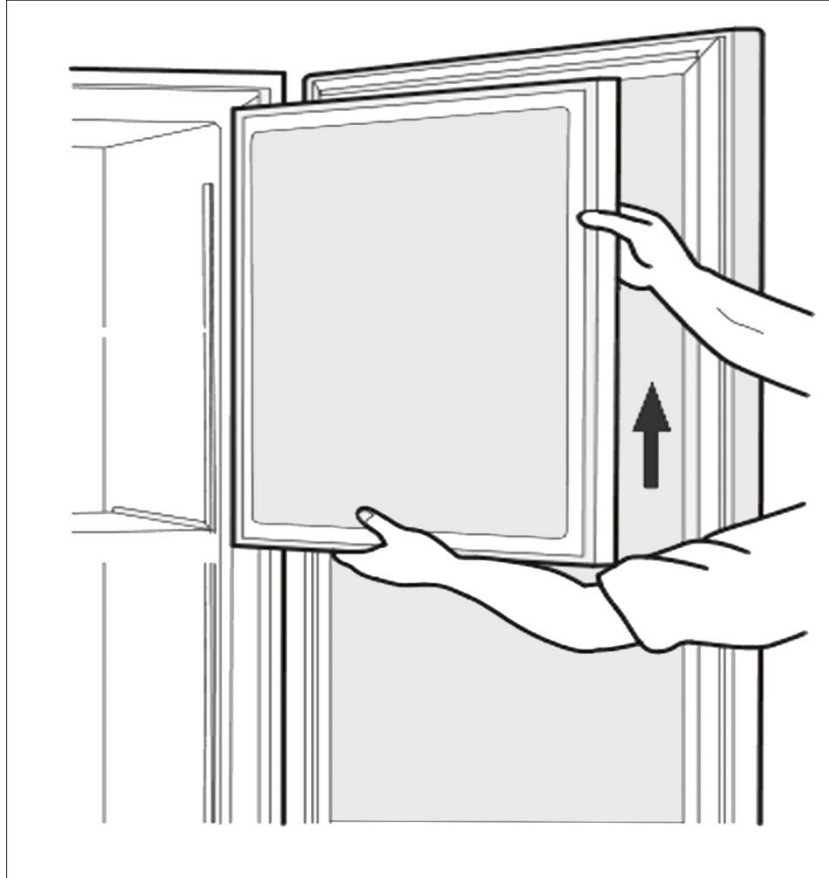

The frost is built at the upper portion of the appliance and inner door. The excessive frost possibly make some gap between the cabinet and door gasket, which may cause poor cooling. Remove the frost on the inner door with a scraper enclosed with the appliance. Defrost the cabinet with following steps.

CAUTION:

For removing the frost, do not use a tool with sharp edge such as a knife or a screwdriver.

- Please turn off the backup cooling system if have.
- Take out and transfer all the objects to another cabinets or containers which is refrigerated by liquid carbon dioxide or dry ice.
- Turn off power switch of the freezer.
- Open the external door and internal door. Hold up the internal door and take it away.
- Keep the external door open to defrost for a moment.
- Clean the water with dry fabric from the bottom of the cabinet.
- After cleaning the cabinet and internal door, put the internal door back; please restart the appliance according to the "Switch on the Appliance".
- Put the objects into the thoroughly refrigerated cabinet.
- Turn on the back-up system if it is provided.

XVI.Failure Recovery

Please check the fault as following before notifying the repair service:

Faults	Checking/Solutions
The cabinet is not fully cooled	✓ Check the appliance if connect to the power supply? ✓ Check if the power voltage is too low? ✓ (Under this condition, please notify the electrician.) ✓ Check if the power switch is turned on? ✓ Check if the fuse blowing? ✓ Check if too much objects are stored in the cabinet?
Poor cooling performance	✓ Check if the ambient temperature is too high? ✓ Check if the internal door is completely closed? Check if the external door is closed firmly? ✓ (The frost or ice between the cabinet and door gasket possibly prevents door seal) ✓ Check if the air inlet grille is blocked? ✓ Check if the filter is dirty and blocked? When the condenser alarm indicator lights on, please clean the filter and condenser. ✓ Check if the internal door is installed correctly? ✓ Check if the temperature is set correctly? ✓ Check if the grille is jammed? ✓ Check if the cabinet is far from direct sunlight? ✓ Check if the cabinet is near the heat source? ✓ Check if the rubber cover and insulating material of the cable port are installed correctly? ✓ Check if too much objects are stored in the cabinet?

CAUTION:

If the problem is not solved or the problem is not listed in the above table, please contact with the after-sale technicians.

XVII. Disposal of Abandoned Appliance

WARNING

- If the appliance is to be stored unused in the open area for an extended period, ensure that children don't approach the appliance and the cabinet door can not be closed completely.
- The abandoned appliance shall be handled by appropriate personnel. Remove the cabinet doors to avoid accidents such as suffocation.

XVIII. Storage Box Rack (Optional)

- ✓ The optional storage box rack are useful to store the small size materials in the appliance effectively. When the racks are used, it is necessary to adjust the height of the shelves.

XIX.Specification

Name	Ultra-low temperature freezer		
Model	UCF-20.8-86-UL	UCF-25.7-86-UL	UCF-29.6-86-UL
External Dimension(mm)	891X1155X1994.5 (W*D*H)	1248X975X1994.5 (W*D*H)	1179X1135X1994.5 (W*D*H)
Internal Dimension(mm)	606X738X1310 ((W*D*H))	963X571X1350 ((W*D*H))	894X718X1310 ((W*D*H))
Effective Volume	588L	728	838
Exterior	Painted Steel Panel		
Interior	Stainless steel		
Outer Door	Painted Steel Panel		
Inner Door	Stainless steel, 2 doors		
Shelf	3 stainless steel shelves (adjustable) Dimension: Width 586XDepth689(mm) Load: 40kg/shelf	3 stainless steel shelves (adjustable) Dimension: Width 937XDepth506(mm) Load: 40kg/shelf	3 stainless steel shelves (adjustable) Dimension: Width 874XDepth669(mm) Load: 40kg/shelf
cable Port	25mm Diameter, 1 holes (back)		
Insulation	Rigid polyurethane foamed and VIP		
Compressor	High: Hermetic type Low: Hermetic type		
Evaporator	Tube type		
Condenser	High:Fin type,Low:Fin type, Plate type		
Refrigerant	High: R-290, Low:R-170		
Controller	Microcomputer control system		
Temperature display	LCD display		
Temperature Sensor	Platinum resistance (Pt 100)		
Alarm	High-temperature alarm, low-temperature alarm, power failure alarm, door-open alarm, filter cleaning alarm, battery alarm, ambient temperature alarm, condenser alarm, fan alarm		
Remote Alarm Terminal	Power the alarm device separately when connect to this port. MAX voltage: 33V		
Battery	Lead-acid cell, DC12V, 7000mAh, automatic charging		
Fuse	F10L250V, replaceable.For replacement, please contact after-sales.		
Accessories	Defrosting scoop		
Net Weight	335kg	380kg	397kg
Optional Parts	Storage Box Rack		

CAUTION:

- Design specifications are subject to change without prior notice.
- The battery for power failure alarm is consumable; it is suggested to replace it every 3 years for once. To replace the battery, please contact the representative of us, agent or after-sale service.

XX. Performance


Model	UCF-20.8-86-UL	UCF-25.7-86-UL	UCF-29.6-86-UL
Cooling Performance	cabinet center-86°C(Ambient temperature 32°C, no-load)		
Temperature Control Range	-60°C~-86°C(Ambient temperature 32°C, no-load)		
Rated Voltage	AC115V,60Hz		
Rated power Consumption	850W	850W	850W
Noise level	55dB[A](background noise, 20dB)		

CAUTION:

- Performance: when the ambient temperature is 32°C, the temperature in the cabinet reaches -86°C (Unload).

XXI.Circuit Diagram

Model : UCF-20.8-86-UL/UCF-25.7-86-UL/UCF-29.6-86-UL

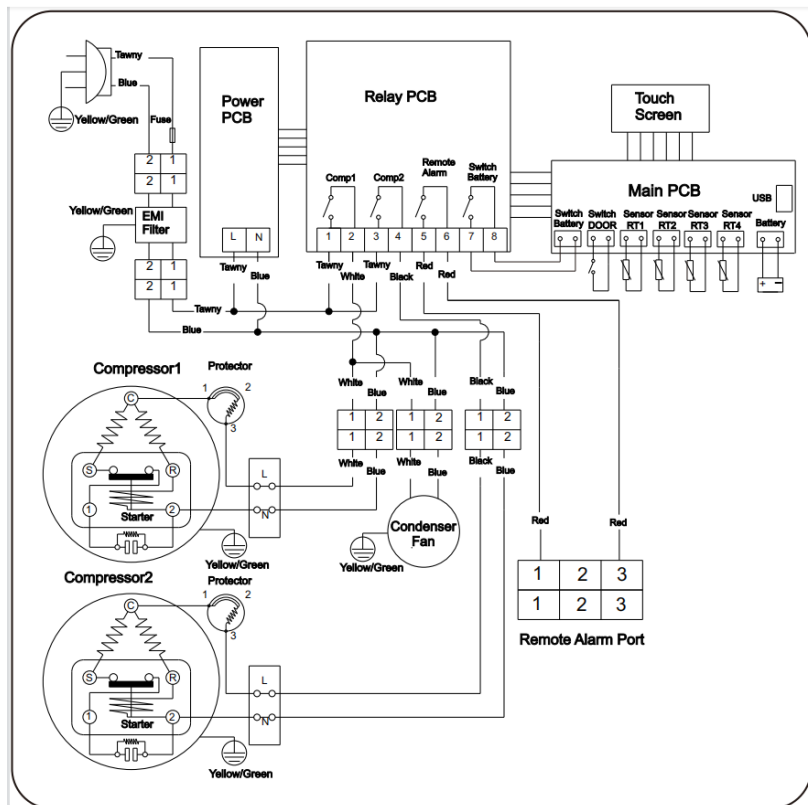

XXII. Packing List

Model	User Manual	Shelf	Key	Buckle	Bracket	Cream shovel
UCF-20.8-86-UL	1	3	2	12	2	1
UCF-25.7-86-UL						
UCF-29.6-86-UL						

Certificate of Quality	
Inspector:	

Manufacturer:

USA LAB INC.

Production address:

12400 Belden Ct Livonia, MI 48150